

Uusi miellyttävä

kieli-, huuli- ja
poskiretraktori!





Umbrella™

TONGUE, LIP, & CHEEK RETRACTOR

Uusi Umbrella-levittäjä on suunniteltu vapaan hoitoalueen ja erinomaisen potilasmukavuuden varmistamiseen. Tutustu hyötyihin, jotka menevät tavanomaista pehmytkudoksen retraktiota pidemmälle:



- Helppo asettaa
- Kertakäyttöinen
- Auttaa potilasta luonnollisesti ja hellävaraisesti pitämään suun auki vetämättä tai venyttämättä potilaan huulia
- Uusi innovatiivinen kielen retraktiolaite pitää kielen miellyttävästi kielen suojuksen takana eli poissa työskentelyalueelta
- Anatomisesti sijoitettujen/muotoiltujen puskurien ansiosta lääkäri voi pitää kättään potilaan suun päällä aiheuttamatta epämukavuutta.
- Miellyttävämpi yökkäville potilaille, koska se ei käynnistä yökkäämisrefleksiä useimmilla potilailla.
- Voidaan pitää paikallaan purennan tarkastuksen aikana

MITEN VALITSEN OIKEAN KOON?

- Jos käytät potilaalle XS-, S- tai M-kokoista jäljennöslusikkaa, valitse keskikokoinen levittäjä.
- Jos käytät potilaalle L- tai XL-kokoista jäljennöslusikkaa, valitse suuri levittäjä.
- Jos olet kahden vaiheilla, valitse suurempi koko.

4870 - Umbrella Retractor Medium 5 kpl/paketti
5 kpl Umbrella-levittäjiä

4871 - Umbrella Retractor Medium 20 kpl/paketti
20 kpl Umbrella-levittäjiä

5162 - Umbrella Retractor Medium 40 kpl/paketti
40 kpl Umbrella-levittäjiä

5256 - Umbrella Retractor Large 5 kpl/paketti
5 kpl Umbrella-levittäjiä

5257 - Umbrella Retractor Large 20 kpl/paketti
20 kpl Umbrella-levittäjiä

5258 - Umbrella Retractor Large 40 kpl/paketti
40 kpl Umbrella-levittäjiä




VAIHE 1.

Valmistele Umbrella™- kielen-, huulten- ja poskenlevittäjä asettamista varten painamalla sen korvakkeita ja varmistamalla, että ylimmän korvakkeen nuolet osoittavat ylöspäin.



Älä aseta levittäjää ylösalaisin.

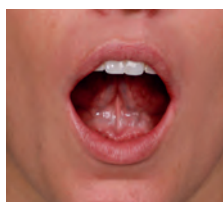

VAIHE 2.

Pyydä potilasta asettamaan kielen kärki suulakeen.



VAIHE 3.

Valitse suun puoli, josta aloitat, ja aseta sitten levittäjän toinen puoli hellävaraisesti poskeen.



VAIHE 4.

Keskitä levittäjä korvakkeiden avulla potilaan suussa.



VAIHE 5.

Tarkista, että potilaan kieli on miellyttävässä asennossa suojuksen takana niin, että toimenpidealueelle on esteetön pääsy.



Älä aseta kielen suojuusta potilaan kielen päälle.

Seuraa meitä!



eu.ultradent.blog

© 2022 Ultradent Products, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

UPP 732-FI 05-2022

ULTRADENT.EU



ULTRADENT
PRODUCTS, INC.