

Opas

myTraining kit

sektori-
matriisi-
järjestelmät

 polydentia
swiss manufacture 



Instrumentteja huippuosaaajille



sektori- matriisi- järjestelmät

Polydentian sektorimatriisijärjestelmät ovat tehokas ja käyttäjäystävällinen ratkaisu kaikkiin luokan II restauroitioihin. Valikoimaan kuuluu separointivoimaltaan erilaisia matriisirenkaita, joista löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin II-luokan kliinisiin tapauksiin ja aplikoitimenelmiin. Kaikki renkaat ja tarvikkeet on suunniteltu muodostamaan hampaan ympärille täydellinen matriisi, parantamaan sektorimatriisinauhan retentiota ja optimoimaan hampaiden interproksimaalisten restauroitioiden anatomiaa. Polydentian sektorimatriisit ovat hammaslääkäreiden käytössä maailmanlaajuisesti ja takaavat erinomaiset tulokset luokan II kaviteettien restauroatioissa - myös haastavissa tapauksissa. Kaikki Polydentian tuotteet valmistetaan Sveitsissä kaikkein vaativimpien kansainvälisten säännösten mukaisesti.

Sisällysluettelo

myClip 2.0	4
myQuickmat Forte kit	6
myQuickmat Classico kit	8
myCustom Rings kit	10
Lisätarvikkeet	12
Täyttöpakkaukset	14

myClip 2.0



Sektorimatriisirengas integroiduilla pihdeillä

Testimoniaali



"myClip 2.0 on erittäin helppokäyttöinen. Sen kärkien muoto ja jäykkyys ovat erityislaatuista ja siksi matriisiin saa tehokkaasti paikalleen sekä palatinaalisille että bukkalisille pinoille. Viimeistelyvaiheessa säästyy aikaa ja proksimaalisesta morfologiasta tulee hyvä."

Dr. David Gerdolle,
Montreux - Sveitsi

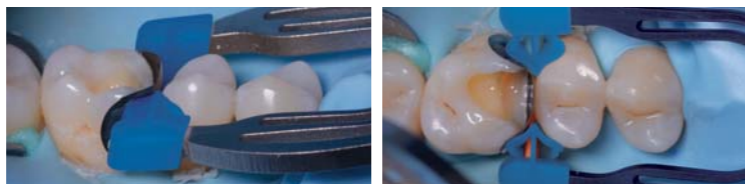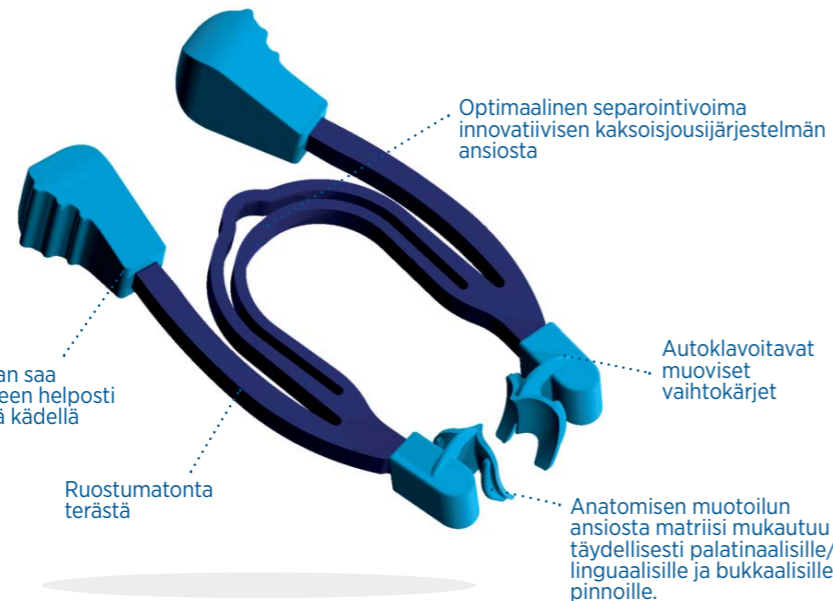

myClip 2.0 All in one -sektorimatriisirengaan saa paikalleen helposti yhden käden sormilla – renkaan käsittelyyn ei tarvita erillisiä pihtejä. Autoklavoitavien muovikärkien avulla matriisi mukautuu täydellisesti palatinaalisille/linguaalisille ja bukkalisille pinoille ja aikaa säästyy, kun viimeistelyvaiheita tarvitaan huomattavasti vähemmän. Matriisirengas ruostumattomasta teräksestä vaihtokärjillä takaa pitkän käyttöiän. myClip 2.0 soveltuu kaikkiin kliinisiin olosuhteisiin, sillä sen separointivoiman avulla saadaan aikaan erinomaiset kontaktikohdat luokan II kaviteetteja restauroitaessa.

myClip 2.0 - REF 6305 / Til.nro 116900

- 1 kpl myClip 2.0
- 2 paria vaihtokärkiä

Aloituspakkaus:

- 5 kpl LumiContrast sektorimatriiseja, premolaari 0,04 mm / 5 mm
- 5 kpl LumiContrast sektorimatriiseja, molaari 0,04 mm / 6,4 mm
- 10 kpl puukiloja pinkki, 11 mm (XS)
- 10 kpl puukiloja turkoosi, 12 mm (S)



Käyttöohjeet



1 - Laita matriisi paikalleen.



2 - Vie separoiva puukiila paikalleen ja mukauta matriisi hampaan muotoon.



3 - Aseta myClip 2.0 pelkästään sormien avulla kiilan päälle.



4 - Muotoile matriisi tarvittaessa.



5 - Täytä kaviteetti ja valokoveta.



6 - Irrota matriisi varovasti ja poista se lateraalisesti myQuickmatrix-pihtiin avulla.



Katso video

myQuickmat Forte kit


Hampaiden **vahvaan** separointiin kehitetty sektorimatriisijärjestelmä

Testimoniaali



“myQuickmat Forte -pakkauksen vahva myRing Forte -rengas separoi hampaat tehokkaasti. myRing Forten kärjet ympäröivät matriisia hellästi ja varmistavat yhdessä myWedge -muovikiilojen kanssa matriisin täydellisen istuvuuden ja vahvan kontaktikohtien restauration.”

Dr. Giuseppe Chiodera,
Brescia - Italia

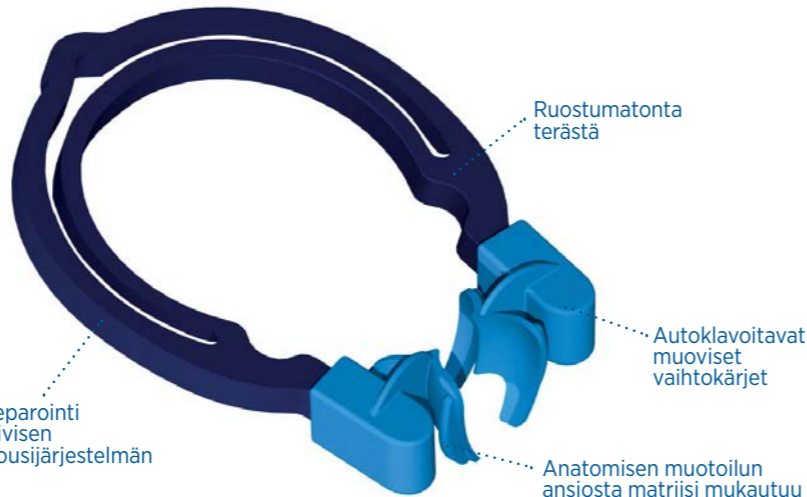


Pakkaus sisältää Polydentian vahvan myRing Forte -renkaan, jonka separointivoima on optimaalinen. Autoklavoitavien muovisten vaihtokärkien ansiosta matriisi mukautuu täydellisesti palatinaalisille/linguaalisille ja bukkaalisille pinnoille. Pakkaus sisältää lajitelman korkealaatuisia, anatomisesti muotoiltuja, hyvin hampaiden väliin sopivia myWedge-muovikiiloja. Kiilan onnto V-rakenne puristuu ja mukautuu hampaiden interproksimaaliseen muotoon. Pakkaukseen sisältyy myös LumiContrast-sektorimatriisilajitelma. Tummansiniset matriisit lisäävät huomattavasti kontrastia ja vähentävät heijastuksia erityisesti silloin, kun käytetään luuppeja tai mikroskooppia.

myQuickmat Forte kit - REF 6803

- 50 kpl Quickmat sektorimatriiseja, premolaari 0,04 mm / 5 mm
- 50 kpl Quickmat sektorimatriiseja, molaari 0,04 mm / 6,4 mm
- 20 kpl Quickmat sektorimatriiseja, Extended 0,04 mm / 6,4 mm + lippa
- 20 kpl LumiContrast sektorimatriiseja, premolaari 0,04 mm / 5 mm
- 20 kpl LumiContrast sektorimatriiseja, molaari 0,04 mm / 6,4 mm
- 20 kpl LumiContrast sektorimatriiseja, Extended 0,04 mm / 6,4 mm + lippa
- 2 kpl myRing Forte
- 2 paria vaihtokärkiä
- 50 kpl myWedge kiiloja, Extrasmall (XS)
- 50 kpl myWedge-kiiloja, Small (S)
- 40 kpl myWedge kiiloja, Medium (M)
- 40 kpl myWedge kiiloja, Large (L)
- 1 kpl myForceps pihdit



Käyttöohjeet

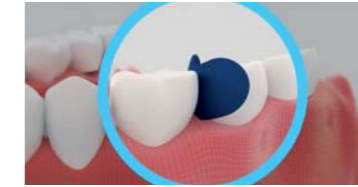

1 - Laita matriisi paikalleen.



2 - Mukauta matriisi hampaan muotoon laittamalla myWedge -muovikiila paikalleen.



3 - Laita myRing Forte paikalleen pakkauksessa olevien myForceps-pihtien avulla.



4 - Aseta myRing Forte myWedge -muovikiilan päälle, jotta saadaan aikaan vahva separaatio.



5 - Muotoile matriisi tarvittaessa.



6 - Täytä kaviteetti ja valokoveta.



7 - Poista matriisi lateraalisesti käyttämällä myQuickmatrix-pihtejä.



Katso video

myQuickmat Classico kit


Hellävaraiseen hampaiden separointiin
kehitetty sektorimatriisijärjestelmä

Testimoniaali



"myRing Classico kit on älykäs ja kokonaisvaltainen ratkaisu erilaisiin luokan II taka-alueen restauraatioihin. Käytössäni on laaja valikoima hyvin ohuita matriiseja, jotka sopivat kaikkiin hammas- ja kaviteettisyvyysiin. Lisäksi klassiset puukiilat varmistavat hyvän istuvuuden ja niitä on helppo muokata kaikkiin käyttötarkoituksiin. Rengasta voin käyttää joustavasti monella eri tavalla, mikä tekee myRing Classicosta ideaalisen monikäyttörenkaan täydellisille aproksimaalikkontaktipinnoille."

Dr. Janos Grosz, Unkari

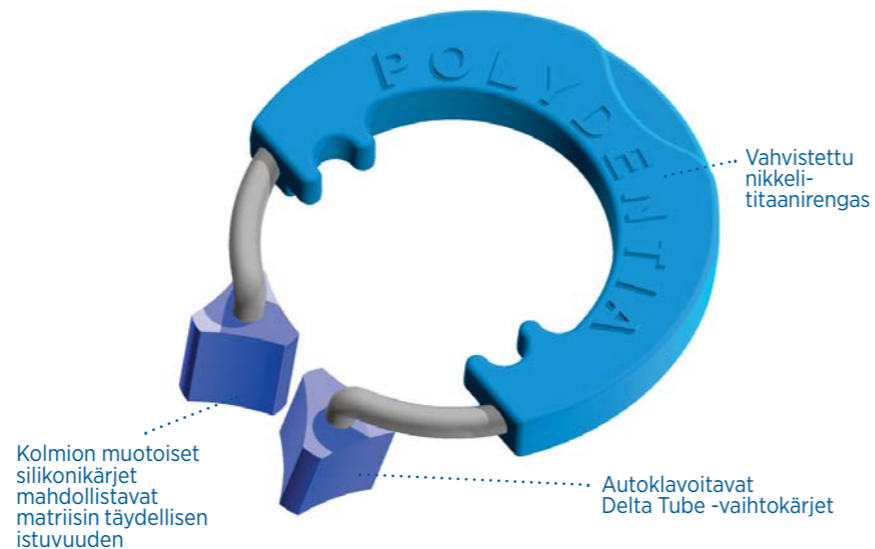


PIENET KAVITEETIT



Delta Tube -kärkien reunat mukautuvat täydellisesti hampaiden väleihin.

LAAJAT KAVITEETIT

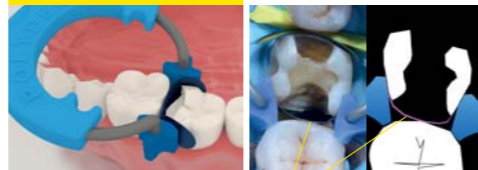

Delta Tube -kärkien tasaiset pinnat tukevat viereistä hammasta eikä matriisin muoto vääristy.


Pakkaukseen sisältyy Polydentian myRing Classico, klassinen nikkelititaanista valmistettu sektorimatriisirengas. Vahvistettu rengas yhdessä pakkaukseen kuuluvien interdentaalisten vaahterapuukiiloiden kanssa separoi optimaalisesti ja hellästi. Pakkaus sisältää myös uudelleenmuotoiltuja Delta Tube -vaihtokärkiä. Anatomisesti muotoillut silikonikärjet varmistavat matriisin optimaalisen retention ja istuvuuden hampaan anatomiaan. Pakkaus sisältää myös LumiContrast -sektorimatriisivalikoiman. Tummansiniset matriisit lisäävät merkittävästi kontrastia ja vähentävät heijastuksia erityisesti silloin, kun käytetään luuppejaita mikroskooppia.

myQuickmat Classico kit - REF 6801


- 50 kpl Quickmat sektorimatriisi, premolaari 0,04 mm / 5 mm
- 50 kpl Quickmat sektorimatriisi, molaari 0,04 mm / 6,4 mm
- 20 kpl Quickmat sektorimatriisi, Extended 0,04 mm / 6,4 mm + lippa
- 20 kpl LumiContrast sektorimatriisi, premolaari 0,04 mm / 5 mm
- 20 kpl LumiContrast sektorimatriisi, molaari 0,04 mm / 6,4 mm
- 20 kpl LumiContrast sektorimatriisi, Extended 0,04 mm / 6,4 mm + lippa
- 2 kpl myRing Classico, 6 paria Delta Tube -vaihtokärkiä
- 50 kpl Puukiilat pinkki, 11 mm (XS)
- 50 kpl Puukiilat, turkoosi, 12 mm (S)
- 40 kpl Puukiilat, 13 mm (M)
- 40 kpl Puukiilat, 15 mm (L)



Käyttöohjeet

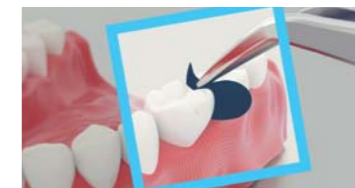

1 - Laita matriisi paikalleen.

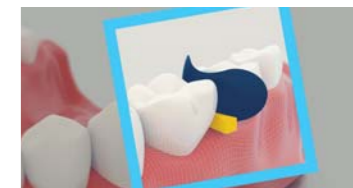


2 - Vie separoiva puukiila paikalleen ja mukauta matriisi hampaan muotoon.



3 - Aseta myRing Classico -rengas paikoilleen ja valitse paras Delta Tube -kärkien asento kaviteetin ominaisuuksien mukaisesti.



4 - Muotoile matriisi tarvittaessa.

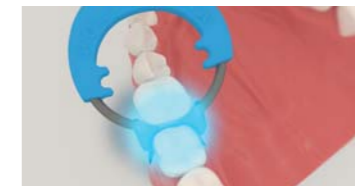

5 - Täytä kaviteetti ja valokoveta.



6 - Poista matriisi lateraalisesti käyttämällä myQuickmatrix-pihtejä.



Katso video


Kliinisestä tapauksesta riippuen, täydellisen matriisin istuvuuden niin vaatiessa myRing Classico -rengasta voi käyttää myös ilman Delta Tube -kärkiä.




myCustom Rings kit

INNOVATIIVINEN MENETELMÄ

podporované
STYLE ITALIANO

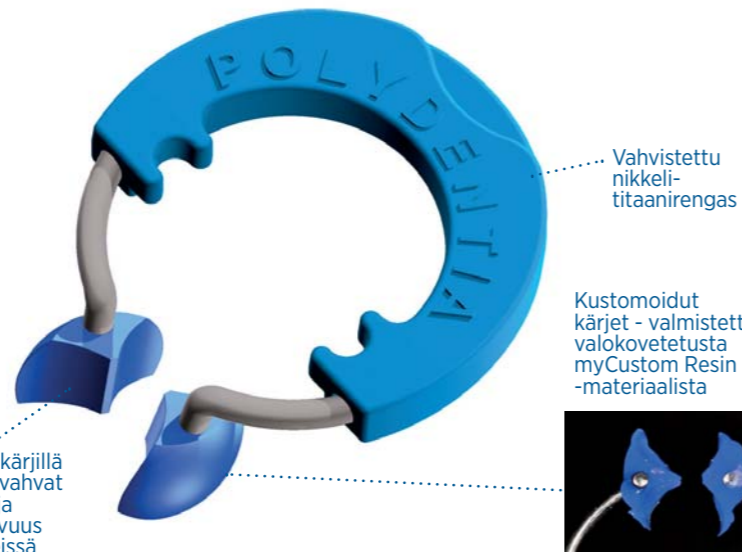

Kustomoiduilla kärjillä aikaansaadaan vahvat kontaktipinnat ja täydellinen istuvuus proksimaaliväleissä

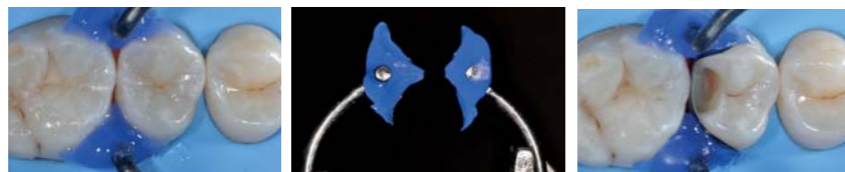

Testimoniaali



"Matriisiin täydellinen istuvuus interproksimaaliväleihin on hyvin yleinen ongelma luokan II kaviteettikäsitelyissä. myCustom Rings kit tarjoaa tehokkaan ja helppokäyttöisen ratkaisun näihin haasteisiin, koska menetelmällä saa aikaan täydelliset kontaktipinnat luokan II restoraatioihin."

Dr. Jordi Manauta,
Sestri Levante - Italia

myCustom Rings kitin innovatiivinen menetelmä on kehitetty yhteistyössä Style Italiano Study Groupin, esteettiseen ja restoratiiviseen hammashoittoon erikoistuneiden johtavien asiantuntijoiden kanssa. myCustomRings -tekniikalla voi helposti kopioida olemassaolevan interproksimaalisen anatomian ja luoda täysin kustomoidut kärjet. Valokovettamalla myCustomResin -materiaali alkuperäisten proksimaaliseen muotoon luodaan täydelliset kärjet käytettäväksi kyseiseen restauraatioon. Kustomoiduilla kärjillä aikaansaadaan vahvat kontaktipinnat ja täydellinen istuvuus proksimaaliväleissä



"myCustom Rings -menetelmän innovatiivinen tekniikka on erinomainen esimerkki filosofiamme: käytännöllinen, opetettava ja toistettava - Style Italianon resepti menestykselliseen päivittäiseen hammashoittoon."


Prof. Angelo Putignano MD, DDS & Dr. Walter Devoto, DDS
Perustajajäsenet Style Italiano Group, Italia

myCustom Rings kit - REF 6802


- 50 kpl Quickmat sektorimatriisi, premolaari 0,025 mm / 5 mm
- 50 kpl Quickmat sektorimatriisi, molaari 0,025 mm / 6,4 mm
- 20 kpl LumiContrast sektorimatriisi, premolaari 0,025 mm / 5 mm
- 20 kpl LumiContrast sektorimatriisi, molaari 0,025 mm / 6,4 mm
- 20 kpl Quickmat läpinäkyvä sektorimatriisi, premolaari 0,075 mm / 5 mm
- 20 kpl Quickmat läpinäkyvä sektorimatriisi, molaari 0,075 mm / 6,4 mm
- 2 kpl myRing Classico, 6 paria Delta Tube -vaihtokärkiä
- 50 kpl Puukiilat pinkki, 11 mm (XS), 50 kpl Puukiilat, turkoosi, 12 mm (S)
- 40 kpl Puukiilat, 13 mm (M), 40 kpl Puukiilat, 15 mm (L)
- 1 kpl myCustom Resin 3 ml + 10 kpl vientikärkiä 18G




Käyttöohje: kustomoitujen kärkien valmistus

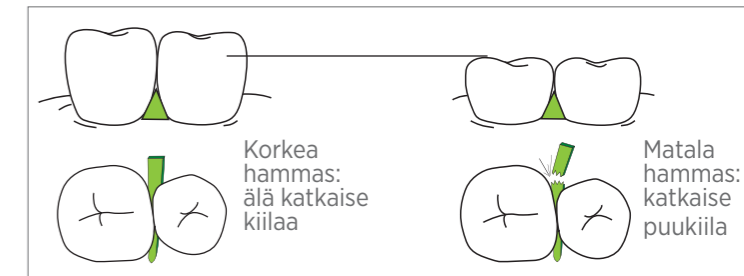

1 - Valitse puukiila ja aseta se paikoilleen. Matalan hampaan tapauksessa katkaise puukiila ylläolevan kuvan mukaisesti.

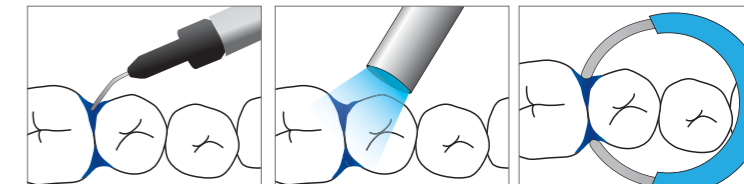

2 - Lisää ensimmäinen kerros myCustom Resiniä proksimaalipinnoille. 3 - Valokoveta noin 20s ajan myCustomResin -kerros. 4 - Aseta myRing Classico valokovetetun myCustom Resinin pinnalle.

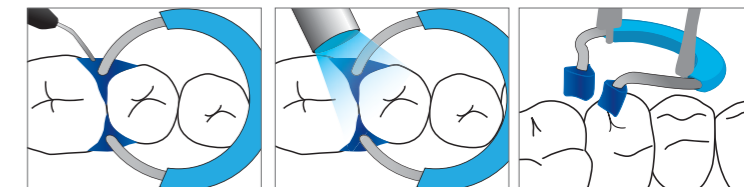

5 - Lisää toinen kerros myCustom Resiniä kiinnittämään myRing Classico tiiviisti ensimmäiseen kerrokseen. 6 - Valokoveta noin 20s ajan toinen kerros myCustomResiniä. 7 - Irrota varovasti valmis myCustom Rings. Poista puukiila tilapäisesti, mutta käytä samaa kiilaa matriisin asettamisen jälkeen ja aseta myCustom Rings paikoilleen. Jatka täytteen tekemistä.



katso video. Lisätietoja
styleitaliano.org/mycustom-rings-kit/

myWedge

myWedge on korkealuokkaisesta muovimateriaalista valmistettu interproksimaalinen kiila. myWedge -kiilan innovatiivinen ontto v-muoto mahdollistaa erinomaisen anatomian ja käytettävyyden hammasväleissä. Se ennaltaehkäisee papillavaurioita ohjaamalla matriisiin anatomisesti tiiviisti hampaan servikaalialueelle. Kiilan erikoismuotoillun geometrian ansiosta sitä on helppo käsitellä, asettaa paikoilleen ja poistaa halutussa vientikulmassa atuloiden tai pihtien avulla.

- **Innovatiivinen ontto v-muoto**
- **Muotoiltu ja tukeva käsittelypää**
- **Kirkkaat värit helppoon tunnistamiseen**

Tilauuskoodit sivulla 14

LumiContrast

Tummansiniset LumiContrast -sektromatriisit lisäävät merkittävästi kontrastia hoitoalueella. Ne vähentävät myös heijastumia erityisesti käytettäessä luuppeja tai mikroskooppia.

- **Korkea kontrasti**
- **Vähentää heijastumia**
- **Erinomainen käytettäessä luuppia tai mikroskooppia**

Tilauuskoodit sivulla 14



Ilman LumiContrast -matriisilla

LumiContrast -matriisilla

myQuickmatrix Forceps

myQuickmatrix Forceps matriisipihdit napakkaan matriisien poistoon restauration jälkeen.

- **Helppo matriisien poisto**
- **Erikoiskärjet napakkaan otteeseen**
- **Kestävät kärjet volframkarbidia**

Tilauuskoodit sivulla 14



myForceps

myForceps -pihdit ovat välttämätön instrumentti kaikkien Polydentian sektorimatriisirenkaiden turvalliseen käsittelyyn, mm. myRing Classico ja myRing Forte. Koukkumuotoillut kärjet takaavat erittäin hyvän kontrollin renkaaseen koko käsittelyn ajan.

- **myRing Forte- ja myRing Classico -renkaiden helppoon käsittelyyn**
- **Vahvat ja kestävät pihdit**
- **Erikoismuotoillut kärjet**

Tilauuskoodit sivulla 14



Teräsmatriisit		Määrä	REF / Til.nro
	Quickmat sektorimatriisi, premolaari 0,025 mm / 5 mm	100	5735 / 116506
	Quickmat sektorimatriisi, molaari 0,025 mm / 6,4 mm	100	5736 / 116511
	Quickmat sektorimatriisi, premolaari 0,04 mm / 5 mm	100	5705 / 116536
	Quickmat sektorimatriisi, molaari 0,04 mm / 6,4 mm	100	5706 / 116541
	Quickmat sektorimatriisi, Extended 0,025 mm / 6,4 mm + lippa	50	5756 / 116521
	Quickmat sektorimatriisi, Extended 0,04 mm / 6,4 mm + lippa	50	5746 / 116526

Sektorimatriisi		Määrä	REF / Til.nro
	Quickmat läpinäkyvä sektorimatriisi, premolaari 0,075 mm / 5 mm	100	5765
	Quickmat läpinäkyvä sektorimatriisi, molaari 0,075 mm / 6,4 mm	100	5766
	Quickmat läpinäkyvä sektorimatriisi, Extended, 0,075 mm / 6,4 mm + lippa	50	5776

LumiContrast -matriisit		Määrä	REF / Til.nro
	LumiContrast sektorimatriisi, premolaari 0,025 mm / 5 mm	70	6735 / 116910
	LumiContrast sektorimatriisi, molaari 0,025 mm / 6,4 mm	70	6736 / 116909
	LumiContrast sektorimatriisi, premolaari 0,04 mm / 5 mm	70	6705 / 116907
	LumiContrast sektorimatriisi, molaari 0,04 mm / 6,4 mm	70	6706 / 116908
	LumiContrast-sektorimatriisi, Extended 0,025 mm / 6,4mm + lippa	50	6756 / 116912
	LumiContrast sektorimatriisi, Extended 0,04 mm / 6,4 mm + lippa	50	6746 / 116915

Kiilat		Määrä	REF / Til.nro
	Pinky puukiilat, 11 mm (XS)	200	5011 / 118024
	Puukiilat, 12 mm (S)	100	5012 / 118025
	Puukiilat, 13 mm (M)	100	5013 / 118026
	Puukiilat, 15 mm (L)	100	5015 / 118028
	myWedge muovikiilat, Extrasmall (XS)	100	7101 / 118050
	myWedge muovikiilat, Small (S)	100	7102 / 118051
	myWedge muovikiilat, Medium (M)	100	7103 / 118052
	myWedge muovikiilat, Large (L)	100	7104 / 118053

Lisätarvikkeet		REF / Til.nro
myQuickmatrix Forceps -matriisipihdit		5703 / 282663
myForceps -pihdit		5707 / 282664
myCustom Resin 3 ml + 10 kpl vientikärkiä 18G		6811 / 116088

Sektorimatriisirenkaat ja tarvikkeet



REF 6805 / Til.nro 116901
myClip 2.0, 2 kpl
Vaihtokärjet, 2 paria



REF 6804 / Til.nro 116905
myRing Classico, 2 kpl
Delta Tubes, 2 paria



REF 6806 / Til.nro 116904
myRing Forte, 2 kpl
Vaihtokärjet, 2 paria



REF 6303 / Til.nro 116087
8 paria vaihtokärkiä.
Yhteensopivuus myClip 2.0
& myRing Forte



REF 5712 / Til.nro 116086
15 paria Delta Tubes
-vaihtokärkiä



Sektorimatriisijärjestelmä- pakkaukset



REF 6305 / Til.nro 116900
myClip 2.0 aloituspakkaus



REF 6803
myQuickmat Forte kit



REF 6801
myQuickmat Classico kit



REF 6802
myCustom Rings kit

Pidetään yhteyttä



www.polydentia.ch



Dental Systems
info@dentalsystems.fi

Asiakaspalvelu: 020 1772 300
www.dentalsystems.fi