

NSK

UUDET PREMIUM-SARJAN TURBIINIKULMAKAPPALEET

TI-MAX Z990KL JA Z890KL



Z990KL

KaVo liitäntä (38W)
360000 kier./min.
Til.nro PA23750001





Z890KL

KaVo liitäntä (36W)
400000 kier./min
Til.nro PA23740001

DYNAMIC POWER SYSTEM

Uusi DYNAMIC POWER SYSTEM

Turbiinin laajennettu paluuilmanakanava, optimoitu suutinrakenne ja kasvatettu roottorin koko, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä takaavat luokkansa korkeimman tehon (max 44 W).

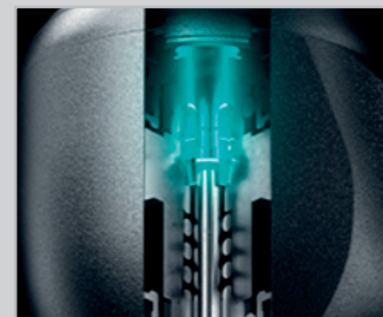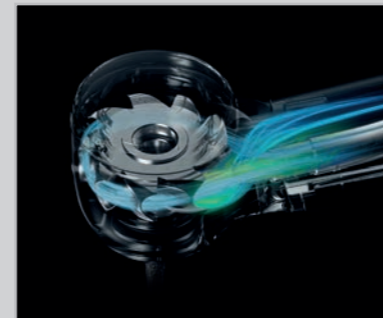

DURAPOWER CHUCK

Uusi DURAPOWER CHUCK poraistukka pitää poranterän entistäkin paremmin kiinni turbiinissa parantaen turbiinin roottorin kestävyyttä ja käyttöikä.

QUICK STOP

Uusi pikapysäytystoiminto pysäyttää pyörivän liikkeen välittömästi tehden hoitotoimenpiteistä entistäkin turvallisempia.



NELIKANAVAINEN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

Uusi nelikanavainen kaksisuuntainen jäähdytysjärjestelmä laajennetulla viilennysvälillä jäähdyttää tehokkaasti myös eripituiset poranterät.



TURBIININ KULMAPÄÄ

100° taivutus kulmapäädessä parantaa saavutettavuutta ja helpottaa hoitotoimenpidettä.




DURAGRIP-OTEPINNOITE

Karhennettu ja naarmuuntumiselta suojaava pintakäsittely on hygienisempi, parantaa kestävyttä ja tarjoaa paremman otteen.



MIKROSUODATIN

Turbiinin vesikanavaan sisäänrakennettu 0,3 mm mikrosuodatin vähentää tukkeutumisia parantaen lisäksi hoitohygieniaa. Suodatin on tarvittaessa omatoimisesti helposti puhdistettavissa.

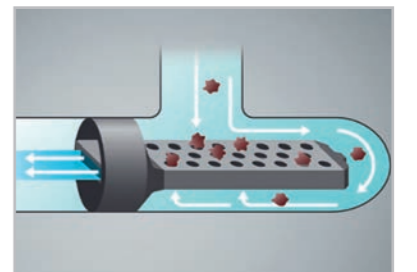

Yhteensopivuus eri valmistajien turbiiniliittämiin.

