


# OptiDisc™ puhdistukseen ja kiillotukseen!

- **Kolme halkaisijaa joilla saavuttaa myös taka-alueet vahingoittamatta ympäröivää kudosta**
- **Värikoodaus** helpottaa oikean karkeuden valintaa
- **Neljä karkeusastetta** muotoiluun, puhdistukseen, kiillotukseen ja korkeakiillotukseen



Yhdistelmämuoveille, lasi-ionomeerille, metalleille ja amalgaamille.

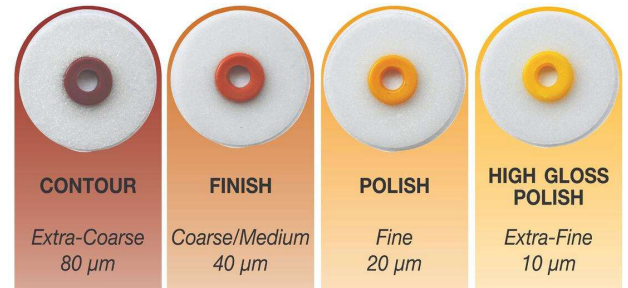

## Miten OptiDisc™ toimii?


OptiDisc ulottuu helposti kaikille alueille ja näkyvyys työalueeseen on erinomainen, koska kiekko on läpikuultava. Kiekko on taipuisa ja se mukautuu hampaan muotoon.

OptiDisc on polyesteriä, joka on päällystetty hiovilla alumiinioksidikiteillä. Hioivassa kerroksessa ei ole liimapinnoitetta.

Kolme halkaisijaa: 9,6mm, 12,6mm ja 15,9mm.



Paketissa mukana patentoitu, lyhyt kehränvarsi, joka ei naarmuta viereisiä hampaita. Lyhyen varren avulla pääsee hyvin taka-alueen hampaiden approksimaaliväleihin.

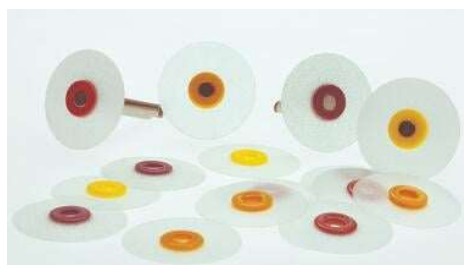

**Kerr**™