




# BUFF® suodatinmaskit

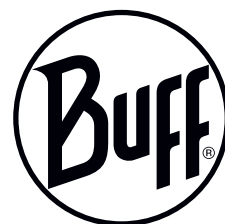

## Vapaa-aikaan ja matkustamiseen koko perheelle

Aito BUFF®-suodatinmaski on kevyt ja istuu mukavasti. Materiaali Coolnet UV+, joka on valmistettu 95 % kierrätetyistä vesipulloista. Säädettävät hihnat varmistavat istuvuuden. Suun ja nenän edessä vaihdettava, Suomessa kehitetty 3-kerrossuodatin, jossa keskellä kerros sulapuhallettua nanokuitua päällystettynä molemmin puolin vettähylykivällä kuidulla. Suodatin on kertakäyttöinen. Käyttöaika riippuu käytöstä ja ympäristöstä ja on maksimissaan 24 h. Suodatuskyky 98 % BFE. Pieni hengitysvastus. Suodatin täyttää Medical facemask -standardin EN 14683:2019 type I ja II. Lateksivapaa.

Suodatintaskussa HeiQ ViroBlock -käsittely, joka suojaa mikrobeilta ja viruksilta. HeiQ-käsittely kestää 10 pesua 60 asteessa ja 30 pesua 40 asteessa. Pakkaus sisältää 5 suodatinta.

Saatavana kaksi kokoa: aikuiset 52–63 cm ja lapset 46–55,5 cm.

Suodatin BUFF-maskit 30 kpl  
Til.nro 249230

Suodatin BUFF JR -maskit 30 kpl  
Til.nro 249231



Suodatinmaski BUFF  
Solid Black 1 kpl  
Til.nro 249200



Suodatinmaski BUFF  
Solid Night Blue 1 kpl  
Til.nro 249201



Suodatinmaski BUFF  
Ape-X Black 1 kpl  
Til.nro 249204



Suodatinmaski BUFF  
Vivid Grey 1 kpl  
Til.nro 249205



Suodatinmaski BUFF  
Keren Flash Pink 1 kpl  
Til.nro 249202



Suodatinmaski BUFF  
Makrana Sky Blue 1 kpl  
Til.nro 249203



Suodatinmaski BUFF  
JR Bawe Black 1 kpl  
Til.nro 249215



Suodatinmaski BUFF  
JR Nympha Pink 1 kpl  
Til.nro 249216