


ONE SHADING MEETS BULK FILLING

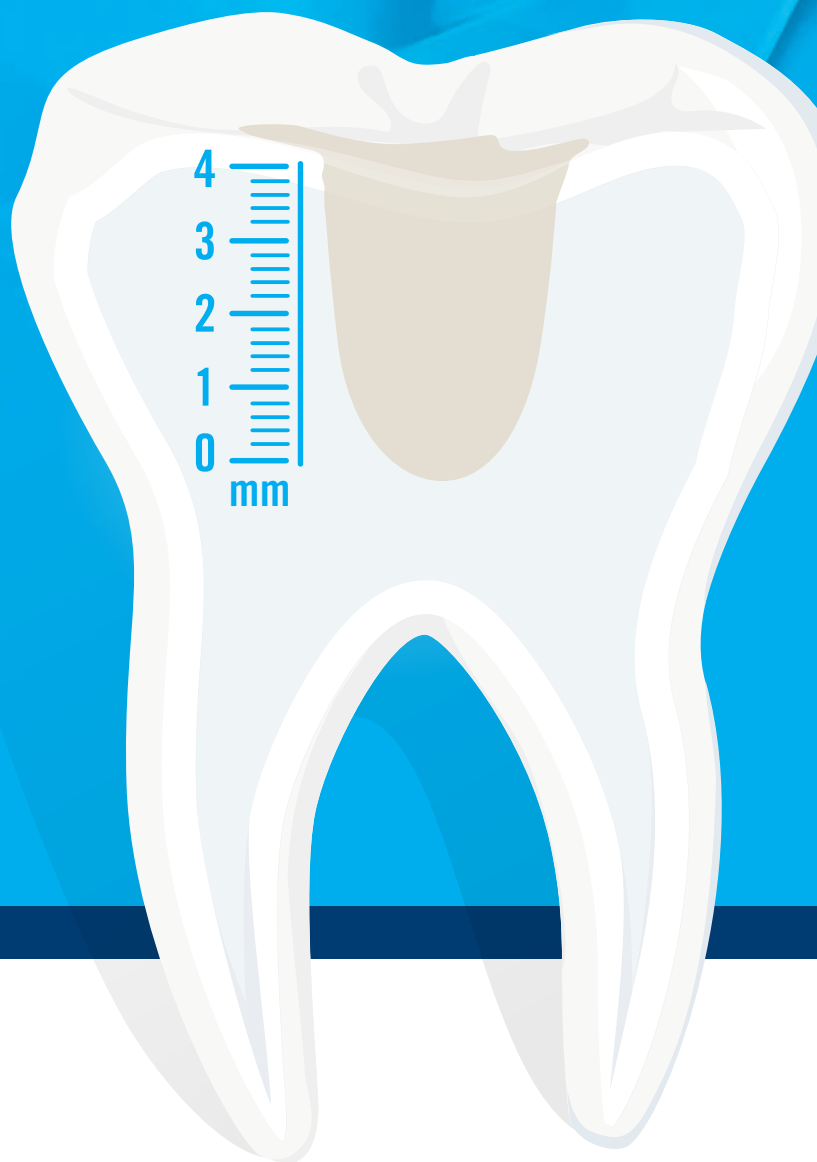

Venus Bulk Flow ONE.

Ensimmäinen juokseva bulk fill-yhdistelmämuovi, jossa on YKSI väri ja jota ei tarvitse päällystää perinteisellä yhdistelmämuovilla.

Lyhyt työskentelyaika: Sekä ONE väri että bulk fill-täyte lyhentävät työskentelyaikaa ja siksi Venus Bulk Flow ONE on sopiva myös maitohampaiden paikkaukseen.

Helppo käsittely: Kaviteetti täytetään nopeasti ja helposti yhdellä kerralla maksimissaan 4 mm kerroksena ilman tarvetta peittää perinteisellä yhdistelmämuovilla.

Kestävät täytteen: Matala kovettumiskutistuminen, korkea taivutuslujuus ja korkea kulumiskestävyys takaavat pitkäikäiset täytteen, jotka kestävät poskihampaiden suurta purentarastusta.



Haluatko kokeilla Venus Bulk Flow ONE:
Skannaa QR-koodi ja siirry suoraan Kulzer Nordic sivuille.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

4
3
2
1
0
mm

ONE LAYER FOR ALL SHADES




UUTUUS

Venus Bulk Flow ONE helpottaa ja yksinkertaistaa taka-alueen hampaiden paikkausta.


Venus Bulk Flow ONE : Juokseva mutta valumaton bulk fill-yhdistelmämuovi, YKSI väri, jota ei tarvitse peittää perinteisellä yhdistelmämuovilla. Applikoi maksimissaan 4mm kerroksena ja valokoveta – helppoa ja yksinkertaista.

Uskomattoman värin mukautumisominaisuuden ansiosta Venus BulkFlowONE on ensimmäinen bulk fill-yhdistelmämuovi joka sulautuu kaikkiin hampaan väreihin, A1-D4. Venus Bulk Flow ONE voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten hammashoidossa.

VALITSE TEKNIKKASII

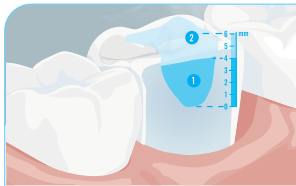

BULK & BODY TECHNIQUE:
1 Venus Bulk Flow ONE
2 + e.g Venus Diamond/Pearl

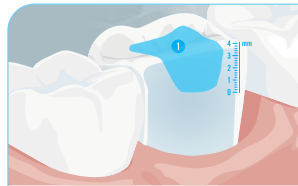

BULK FILLING TECHNIQUE:
1 Venus Bulk Flow ONE

LUOTETTAVA KÄSITTELY



Värjäntynyt kaviteetti

Venus Bulk Flow ONE kiillotuksen jälkeen

Korkea röntgenkontrasti varmistaa luotettavan diagnosoinnin

Venus BulkFlowONE on helposti kaviteettiin leviävä materiaali, korkealla kovettumisvyvytydellä ja joka ei valu applikoinnin jälkeen.

Tämä mahdollistaa jopa 4 mm:n applikoinnin kaviteettiin.

Venus Bulk Flow ONE:n avulla hammaslääkäreiden työskentely nopeutuu eikä väriä tarvitse valita tai päällystää perinteisellä yhdistelmämuovilla.

Venus Bulk Flow ONE täyteen pitkäikäisyys saavutetaan käyttämällä monipuolista ja luotettavaa iBond Universal sidosainetta.

Venus Supra – Helppo tapa korkeaan kiiltoon.

Venus Supra kaksivaiheiseen kiillotusjärjestelmään kuuluu esikiillotajat ja korkeakiiltoiset timattikiillotajat eri muodoissa. Nämä on valmistettu Venus yhdistelmämuovien kiillotukseen.

Kulzer tuotenumero	Paketti	Sisältö
Venus Bulk Flow ONE – Refillit		
66094723	VENUS BULK FLOW SYR 1x2G ONE	1 x 2g ruisku 5 x neulakärjet
66094724	VENUS BULK FLOW PLT 2x10x,02g ONE	PLT 2x10x0,2g



Arja Nyman

+358 400 50 10 10
arja.nyman@kulzer-dental.com

Haluatko kokeilla Venus Bulk Flow ONE:
kulzer.com/try-venus-bulk-flow-one